



Oclean

Xiaomi Oclean X Toothbrush

Používateľská príručka


Ďakujeme vám, že ste si zvolili
zubnú kefku Oclean X!

Bezpečnostné pokyny

- * Zariadenie nie je vhodné pre osoby mladšie 12 rokov.
- * Kefka sa pri nabíjaní mierne zahrieva. Ak sa vám zdá byť príliš horúca, prestaňte ju nabíjať a kontaktujte autorizovaný servis.
- * Využívajte iba originálne príslušenstvo a náhradné hlavice určené pre tento model.
- * Kefka je určená výhradne pre čistenie zubov, jazyka a masírovanie ďasien. Akékoľvek iné využitie je zakázané.
- * Z hygienických dôvodov by mal mať každý používateľ kefku svojou vlastnou hlaviciou.
- * Kefka nie je určená pre vonkajšie použitie a nemala by byť vystavená priamemu slnku.
- * Pravidelne udržiavajte kefku aj jej napájaciu stanicu. Zanesenie spojov nečistotami môže zapríčiniť zníženie výkonu alebo nefunkčnosť zariadenia.
- * Osoby psychicky alebo fyzicky obmedzené by mali kefku používať výhradne pod dohľadom zodpovednej osoby.

Inštrukcia

- * Pri prvom spustení sa kefka automaticky prepne do párovacieho režimu. Stiahnite si aplikáciu Oclean a dokončite párovanie.
- * Vyhľadajte výraz „Oclean app“ v Google Play alebo Store pre stiahnutie aplikácie. Prepojte svoje zariadenia s kefkou Oclean X a nastavte si svoj plán čistenia. Potom si podľa plánu vyčistíte zuby. Týmto sa používateľský program uloží a už ho nebude nutné znovu nastavovať v aplikácii.
- * Je možné používať kefku aj bez prepojenia s aplikáciou. Hneď ako ju zapnete, zobrazí sa na displeji výraz „Connect Toothbrush“ (pripojte kefku) a možnosť „Skip“ (preskočiť). Stlačením tlačidla preskočíte celý proces párovania.
- * Kefka sa automaticky zapne vybratím z nabijacej stanice. V prípade nečinnosti dlhšie než 8 sekúnd prejde kefka do úsporného režimu.
- * Stlačením tlačidla prepínate medzi jednotlivými programami čistenia. Na výber máte medzi štandardným a používateľským programom.

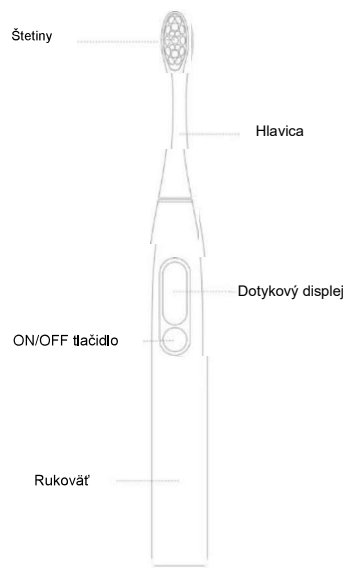

- Štandardná doba čistenia je 2 minúty. Kefka vás každý 30 sekúnd upozorní, že je čas zmeniť oblasť čistenia. Po dokončení programu sa kefka automaticky prepne do úsporného režimu.


- Kefka môže automaticky znížiť výkon a intenzitu čistenia. Týmto chráni vaše ústa pred príliš tvrdým čistením. Znižujúca sa hlasitosť motora pri čistení je tu úplne normálna. Túto funkciu je možné vypnúť alebo upraviť v nastavení.

- Po dokončení programu sa na displeji kefy zobrazí záznam z čistenia. Dozviete sa, či ste si čistili zuby efektívne, budete bodovo ohodnotený a dostanete užitočné rady pre ďalšie čistenie. Zozbierané dáta je možné si prehliadnuť aj v grafe.

- Ťahaním prsta po displeji hore prejdete na pokročilejšie možnosti. Následne môžete prepínať medzi ďalšími 4 režimami a 32 intenzitami čistenia. Na výber máte napríklad „Whitening mode“ (bieliaci režim) a „Massaging Mode“ (masážny režim). Kefka si vašu voľbu zapamätá a režim automaticky zvolí pri ďalších čisteniach.



Ťahajte prstom hore alebo dole

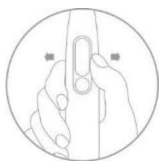

Ťahajte prstom doľava alebo doprava.



Stlačte tlačidlo



- Ikona slnka vás upozorní, že ste posledných 7 dní nesynchronizovali kefku s aplikáciou a preto nie je možné zobrazit' aktuálnu predpoveď počasia.



- Ikona Bluetooth sa zobrazí, ak je kefka prepojená s aplikáciou Oclean.



- Táto ikona sa na displeji ukáže, keď je dostupná nová softvérová aktualizácia alebo kefka prijala iné dôležité oznámenie.



- Hodnota intenzity rozlišuje čistenie na tvrdé, stredné a mäkké. Táto hodnota je premenlivá a priebežne sa mení v priebehu čistenia podľa vyvinutého tlaku a doby čistenia.



- Po každom dokončení programu môžete previesť svoje skóre na body. Po synchronizovaní sa zobrazí celkový počet nazbieraných bodov v aplikácii. Aplikácia nemá žiadny limit bodov, ale kefka dokáže zobrazit' maximálne trojcifernú číslicu. Tým pádom nie je možné nazbierať viac ako 999 bodov bez synchronizácie s aplikáciou.



Bezodkladne nabite svoju kefku, ak sa na displeji zobrazí táto ikona. Počkajte, kým nie je batéria úplne dobíť a na displeji sa nezobrazí „100 %“.

V aplikácii okrem iného nájdete aj aktuálny stav batérie.


Nabíjanie

Pripojte nabíjaciu stanicu ku spodnej strane kefy. V priebehu nabíjania sa na displeji zobrazuje aktuálny stav batérie. Doba nabíjania je 2,5 hodiny. Pri nízkom napätí alebo dobíjaní cez USB sa môže táto doba predĺžiť až na 3 hodiny.

Odporúčaný adaptér: 5 V/1 A – 5 V/2 A

Dôležité informácie

Oclean X podporuje rýchle nabíjanie. Odporúčame batériu neprebíjať. V žiadnom prípade teda neodkladajte zariadenia do nabíjacej stanice, kým je úplne dobíť. Pre správne uloženie kefy využite nástenný držiak.

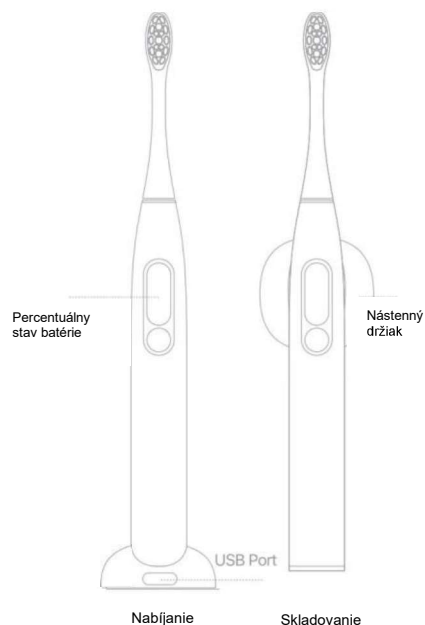

Upozornenie

- Nedemontujte zariadenie.
- Nepoužívajte naďalej zariadenie, ak je batéria poškodená.
- Nevystavujte zariadenie vysokým teplotám.
- Nezapínajte prístroj, ak doň vnikla tekutina.